# Экспериментальная проверка уравнения Эйнштейна для фотоэффекта и определение постоянной Планка


Дедков Денис, Маслов Артём группа Б01-108а 02.10.2023

### Цель и задачи работы:

- 1. Исследовать зависимость величины фототока от задерживающего потенциала и частоты падающего излучения.
- 2. Вычислить величину постоянной Планка.

#### Описание экспериментальной установки

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1:

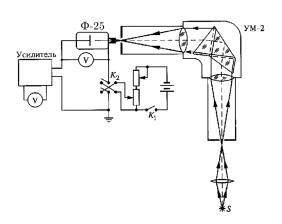

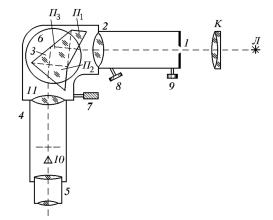


Рис. 1: Схема экспериментальной установки.

Рис. 2: Схема монохроматора.

Излучения источника S фокусируется на входную щель призменного монохроматора УМ-2, выделяющего узкий спектральный интервал, и попадает на катод фотоэлемента  $\Phi$ -25.

Рассмотрим схему монохроматора рисунок 2. Входная щель 1 снабжена микрометрическим винтом 9 для регулировки нужной ширины щели. Коллиматорный объектив 2 имеет микрометрический винт 8, который позволяет смещать объектив относительно щели при фокусировке различных спектральных линий. Спектральная призма 3 выделяет узкую линию спектра падающего излучения. Поворотный столик 6 позволяет и барабан 7 с делениями позволяют наводиться на нужную спектральную линию. Зрительная труба, состоящая из объектива 4 и окуляра 5, позволяет проградуировать барабан на спектральные линии. При измерениях зрительная трубка заменяется блоком фотодетектора.

Фототок на фотоэлемента усиливается усилителем и напряжение, пропорциональное току измеряется вольтметром. Величина задерживающего напряжение фотоэлемента измеряется вторым вольтметром. Величину задерживающего напряжения можно регулировать с помощью блока питания.

#### Оборудование и приборы

Экспериментальная установка №1.14.

- 1. Фотоэлемент Ф-25.
- 2. Призменный монохроматор УМ-2. Рабочий диапазон от 0.38 мкм до 1.00 мкм. Инвентарный номер №410134125745. Заводской номер №51026.
- 3. Неоновая лампа.

- 4. Лампа накаливания К-12.
- 5. Вольтметры GDM-8145. Инвентарный номер вольтметра, измеряющего напряжение пропорциональное фототоку, №51391. Инвентарный номер вольтметра, измеряющего задерживающее напряжение, №51399. Погрешность измерения постоянного напряжения  $\sigma = \pm (0.03\% rdg + 4 digits)$ .
- 6. Блок питания. Инвентарный номер №410134125745.

#### Первичные экспериментальные данные

В таблице 1 приведены данные градуировки монохроматора.  $\lambda$  – длина спектральной линии  $^{10}Ne,\,N$  – отсчёты в градусах, соответствующие данной спектральной линии.

Таблица 1.		Таблица 2. Длина волны 7032.41Å.					Таблица 3. Длина волны 6678.28Å.				
Градуировка			$N = 2992^{\circ}$					$N = 2882^{\circ}$			
призменного монохроматора.		$U_{\rm зап}$ , В	$\sigma_{U_{\mathrm{3an}}},\mathrm{B}$	$U_{\Phi^{\mathrm{T}}}$ , B	$\sigma_{U_{\Phi^{\mathrm{\scriptscriptstyle T}}}}$ , B		$U_{\rm san}$ , B	$\sigma_{U_{\rm san}}$ , B	$U_{\Phi^{\mathrm{\scriptscriptstyle T}}}$ , B	$\sigma_{U_{\Phi^{\mathrm{\scriptscriptstyle T}}}}$ , B	
	<u>-</u>	7.00	0.21	0.61	0.02		7.43	0.23	0.61	0.02	
$\lambda, \mathrm{\AA}$	$N,^{\circ}$	6.00	0.18	0.60	0.02		7.00	0.21	0.60	0.02	
7032	2992	5.00	0.15	0.59	0.02		6.00	0.18	0.60	0.02	
6929	2966	4.00	0.12	0.58	0.02		5.00	0.15	0.58	0.02	
6717	2895	3.00	0.09	0.55	0.02		4.00	0.12	0.57	0.02	
6678	2882	2.00	0.06	0.51	0.02		3.00	0.09	0.55	0.02	
6599	2855	1.80	0.06	0.51	0.02		2.00	0.06	0.51	0.02	
6533	2832	1.60	0.05	0.49	0.02		1.80	0.06	0.50	0.02	
6507	2824	1.40	0.05	0.47	0.02		1.60	0.05	0.49	0.02	
6402	2785	1.20	0.04	0.45	0.02		1.40	0.05	0.48	0.02	
6383	2778	1.00	0.03	0.41	0.02		1.20	0.04	0.46	0.02	
6334	2759	0.80	0.03	0.35	0.01		1.00	0.03	0.43	0.02	
6305	2748	0.60	0.02	0.26	0.01		0.80	0.03	0.39	0.02	
6266	2732	0.50	0.02	0.22	0.01		0.60	0.02	0.32	0.01	
6217	2712	0.40	0.02	0.18	0.01		0.50	0.02	0.27	0.01	
6164	2690	0.30	0.01	0.14	0.01		0.40	0.02	0.23	0.01	
6143	2681	0.20	0.01	0.10	0.01		0.30	0.01	0.18	0.01	
6096	2662	0.10	0.01	0.06	0.01		0.20	0.01	0.14	0.01	
6074	2651	0.00	0.01	0.03	0.01		0.10	0.01	0.10	0.01	
6030	2632	-0.05	0.01	0.02	0.01		0.05	0.01	0.08	0.01	
5976	2607	-0.10	0.01	0.01	0.01		0.00	0.01	0.06	0.01	
5945	2592	-0.16	0.01	0.00	0.01		-0.05	0.01	0.04	0.01	
5882	2562	-					-0.10	0.01	0.03	0.01	
5852	2546						-0.15	0.01	0.02	0.01	
5401	2287						-0.20	0.01	0.01	0.01	
							-0.25	0.01	0.00	0.01	


Таблица 4. Длина волны 6506.53Å.					Таблица 5. Длина волны 6334.42Å.					
$N = 2824^{\circ}$				-	$N = 2759^{\circ}$					
$U_{\rm зап}$ , В	$\sigma_{U_{\rm 3an}}$ , B	$U_{\Phi^{\mathrm{\scriptscriptstyle T}}}$ , B	$\sigma_{U_{\Phi^{\mathrm{T}}}}$ , B		$U_{\rm зап}$ , В	$\sigma_{U_{\mathrm{зan}}}$ , B	$U_{\Phi^{\mathrm{\scriptscriptstyle T}}}$ , B	$\sigma_{U_{\Phi^{\text{\tiny T}}}}$ , B		
7.00	0.21	0.60	0.02		7.00	0.21	0.60	0.02		
6.00	0.18	0.59	0.02		6.00	0.18	0.59	0.02		
5.00	0.15	0.58	0.02		5.00	0.15	0.58	0.02		
4.00	0.12	0.57	0.02		4.00	0.12	0.56	0.02		
3.00	0.09	0.54	0.02		3.00	0.09	0.54	0.02		
2.00	0.06	0.51	0.02		2.00	0.06	0.51	0.02		
1.80	0.06	0.50	0.02		1.80	0.06	0.50	0.02		
1.60	0.05	0.49	0.02		1.60	0.05	0.49	0.02		
1.40	0.05	0.48	0.02		1.40	0.05	0.47	0.02		
1.20	0.04	0.46	0.02		1.20	0.04	0.45	0.02		
1.00	0.03	0.43	0.02		1.00	0.03	0.43	0.02		
0.80	0.03	0.39	0.02		0.80	0.03	0.38	0.02		
0.60	0.02	0.32	0.01		0.60	0.02	0.32	0.01		
0.50	0.02	0.28	0.01		0.50	0.02	0.28	0.01		
0.40	0.02	0.24	0.01		0.40	0.02	0.24	0.01		
0.30	0.01	0.20	0.01		0.30	0.01	0.20	0.01		
0.20	0.01	0.15	0.01		0.20	0.01	0.16	0.01		
0.10	0.01	0.11	0.01		0.10	0.01	0.12	0.01		
0.05	0.01	0.09	0.01		0.00	0.01	0.08	0.01		
0.00	0.01	0.07	0.01		-0.05	0.01	0.07	0.01		
-0.05	0.01	0.06	0.01		-0.10	0.01	0.05	0.01		
-0.10	0.01	0.04	0.01		-0.15	0.01	0.04	0.01		
-0.15	0.01	0.03	0.01		-0.20	0.01	0.02	0.01		
-0.20	0.01	0.02	0.01		-0.25	0.01	0.01	0.01		
-0.25	0.01	0.01	0.01		-0.30	0.01	0.01	0.01		
-0.30	0.01	0.00	0.01		-0.34	0.01	0.00	0.01		
	ца 6. Длина			-						
Таолип	N=2		217.2011.	-	Таблица 7. Длина волны $6074.34$ Å. $N = 2651^{\circ}$					
$U_{\rm зап}$ , В	$\sigma_{U_{\mathtt{Barr}}},\mathrm{B}$		$\sigma_{U_{\Phi^{\mathrm{T}}}}$ , B		$U_{\rm зап}$ , В	$\sigma_{U_{\mathtt{3an}}},\mathrm{B}$		$\sigma_{U_{\Phi^{\mathrm{\scriptscriptstyle T}}}}$ , B		
7.00	0.21	0.59	0.02	-	7.00	0.21	0.59	0.02		
6.00	0.18	0.58	0.02		6.00	0.18	0.58	0.02		
5.00	0.15	0.57	0.02		5.00	0.15	0.56	0.02		
4.00	0.12	0.56	0.02		4.00	0.12	0.55	0.02		
3.00	0.09	0.54	0.02		3.00	0.09	0.53	0.02		
2.00	0.06	0.50	0.02		2.00	0.06	0.49	0.02		
1.80	0.06	0.49	0.02		1.80	0.06	0.48	0.02		
1.60	0.05	0.48	0.02		1.60	0.05	0.47	0.02		
1.40	0.05									
	0.00	0.47	0.02		1.40	0.05	0.46	0.02		
1.20	0.04	$0.47 \\ 0.45$	$0.02 \\ 0.02$		$1.40 \\ 1.20$		$0.46 \\ 0.44$	$0.02 \\ 0.02$		
$\frac{1.20}{1.00}$						0.05				
1.00	0.04	$0.45 \\ 0.42$	$0.02 \\ 0.02$		1.20 1.00	$0.05 \\ 0.04 \\ 0.03$	$0.44 \\ 0.41$	$0.02 \\ 0.02$		
$1.00 \\ 0.80$	0.04 0.03 0.03	$0.45 \\ 0.42 \\ 0.38$	$0.02 \\ 0.02 \\ 0.02$		1.20 1.00 0.80	$0.05 \\ 0.04$	$0.44 \\ 0.41 \\ 0.36$	0.02 0.02 0.01		
1.00	$0.04 \\ 0.03$	$0.45 \\ 0.42$	$0.02 \\ 0.02$		1.20 1.00	0.05 0.04 0.03 0.03	$0.44 \\ 0.41$	$0.02 \\ 0.02$		
1.00 0.80 0.60	0.04 0.03 0.03 0.02	0.45 $0.42$ $0.38$ $0.31$	0.02 0.02 0.02 0.01		1.20 1.00 0.80 0.60	0.05 0.04 0.03 0.03 0.02	0.44 $0.41$ $0.36$ $0.30$	0.02 0.02 0.01 0.01		
1.00 0.80 0.60 0.50	0.04 0.03 0.03 0.02 0.02	0.45 0.42 0.38 0.31 0.28	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01		1.20 1.00 0.80 0.60 0.50	0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02	0.44 0.41 0.36 0.30 0.27	0.02 0.02 0.01 0.01 0.01		
1.00 0.80 0.60 0.50 0.40	0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02	0.45 $0.42$ $0.38$ $0.31$ $0.28$ $0.24$	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01		1.20 1.00 0.80 0.60 0.50 0.40	0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02	0.44 0.41 0.36 0.30 0.27 0.23	0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01		
1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30	0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01	0.45 0.42 0.38 0.31 0.28 0.24 0.20	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01		1.20 1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30	0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01	0.44 0.41 0.36 0.30 0.27 0.23 0.20	0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01		
1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20	0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01	0.45 $0.42$ $0.38$ $0.31$ $0.28$ $0.24$ $0.20$ $0.16$	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		1.20 1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20	0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01	0.44 0.41 0.36 0.30 0.27 0.23 0.20 0.16	0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		
1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20	0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01	0.45 $0.42$ $0.38$ $0.31$ $0.28$ $0.24$ $0.20$ $0.16$ $0.12$	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		1.20 1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10	0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01	0.44 0.41 0.36 0.30 0.27 0.23 0.20 0.16 0.13	0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		
1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10	0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01	$\begin{array}{c} 0.45 \\ 0.42 \\ 0.38 \\ 0.31 \\ 0.28 \\ 0.24 \\ 0.20 \\ 0.16 \\ 0.12 \\ 0.09 \end{array}$	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		1.20 1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10	0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01	0.44 0.41 0.36 0.30 0.27 0.23 0.20 0.16 0.13 0.09	0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		
1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10	0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01	$\begin{array}{c} 0.45 \\ 0.42 \\ 0.38 \\ 0.31 \\ 0.28 \\ 0.24 \\ 0.20 \\ 0.16 \\ 0.12 \\ 0.09 \\ 0.06 \end{array}$	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		1.20 1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10	0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01	0.44 0.41 0.36 0.30 0.27 0.23 0.20 0.16 0.13 0.09 0.06	0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		
1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10	0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	$\begin{array}{c} 0.45 \\ 0.42 \\ 0.38 \\ 0.31 \\ 0.28 \\ 0.24 \\ 0.20 \\ 0.16 \\ 0.12 \\ 0.09 \\ 0.06 \\ 0.04 \end{array}$	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		1.20 1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10	0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.44 0.41 0.36 0.30 0.27 0.23 0.20 0.16 0.13 0.09 0.06 0.05	0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		
1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10 -0.15 -0.20	0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	$\begin{array}{c} 0.45 \\ 0.42 \\ 0.38 \\ 0.31 \\ 0.28 \\ 0.24 \\ 0.20 \\ 0.16 \\ 0.12 \\ 0.09 \\ 0.06 \\ 0.04 \\ 0.03 \end{array}$	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		1.20 1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10 -0.15 -0.20	0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.44 0.41 0.36 0.30 0.27 0.23 0.20 0.16 0.13 0.09 0.06 0.05 0.03	0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		
1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25	0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.45 0.42 0.38 0.31 0.28 0.24 0.20 0.16 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02	0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		1.20 1.00 0.80 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25	0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	0.44 0.41 0.36 0.30 0.27 0.23 0.20 0.16 0.13 0.09 0.06 0.05 0.03 0.02	0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		

Таблица 8. Длина волны 5944.83Å.

$N = 2592^{\circ}$								
$U_{\rm зап}$ , В	$\sigma_{U_{\rm 3an}}$ , B	$U_{\Phi^{\mathrm{\scriptscriptstyle T}}}$ , B	$\sigma_{U_{\Phi^{\mathrm{\scriptscriptstyle T}}}}$ , B					
7.00	0.21	0.58	0.02					
6.00	0.18	0.57	0.02					
5.00	0.15	0.56	0.02					
4.00	0.12	0.55	0.02					
3.00	0.09	0.52	0.02					
2.00	0.06	0.49	0.02					
1.80	0.06	0.48	0.02					
1.60	0.05	0.47	0.02					
1.40	0.05	0.45	0.02					
1.20	0.04	0.43	0.02					
1.00	0.03	0.40	0.02					
0.80	0.03	0.35	0.01					
0.60	0.02	0.29	0.01					
0.50	0.02	0.26	0.01					
0.40	0.02	0.22	0.01					
0.30	0.01	0.19	0.01					
0.20	0.01	0.16	0.01					
0.10	0.01	0.13	0.01					
0.00	0.01	0.10	0.01					
-0.10	0.01	0.07	0.01					
-0.15	0.01	0.05	0.01					
-0.20	0.01	0.04	0.01					
-0.25	0.01	0.03	0.01					
-0.30	0.01	0.02	0.01					
-0.35	0.01	0.01	0.01					
-0.40	0.02	0.00	0.01					
-0.43	0.02	0.00	0.01					

## Обработка экспериментальных данных


Построим график градуировочной кривой призменного монохроматора.

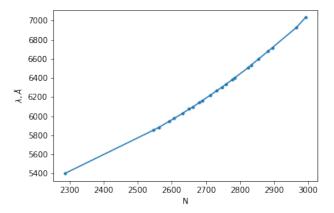

Погрешность измерения угла  $\sigma_N = 1^\circ$ . Длина спектральной линии является табличным значением, погрешностью её определения пренебрегаем.

Видно, что график не является прямой и поэтому необходимо было провести градуировку: поставить в соответствие каждой спектральной линии угол, измеренный по отсчётному барабану.

Построим графики зависимостей корня из напряжения, пропорционального току, от задерживающего напряжения  $\sqrt{U_I}(V)$ .

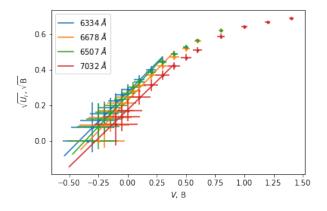

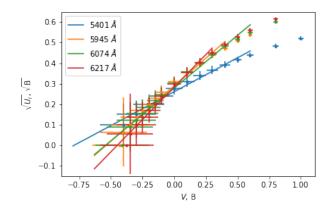


Рис. 3: График зависимости  $\sqrt{U_I}(V)$  для 1 части спектра.

Рис. 4: График зависимости  $\sqrt{U_I}(V)$  для 2 части спектра.

Согласно теории  $\sqrt{U_I} \propto V$ . Методом наименьших квадратов построим аппроксимирующие кривые и определим величину задерживающего напряжения:

$$\begin{split} &\lambda = 7032.41\text{\AA}, V_0 = (-0.28 \pm 0.01)\text{B}, \\ &\lambda = 6678.28\text{Å}, V_0 = (-0.33 \pm 0.02)\text{B}, \\ &\lambda = 6506.53\text{Å}, V_0 = (-0.37 \pm 0.02)\text{B}, \\ &\lambda = 6334.42\text{Å}, V_0 = (-0.42 \pm 0.02)\text{B}, \\ &\lambda = 6217.28\text{Å}, V_0 = (-0.45 \pm 0.02)\text{B}, \\ &\lambda = 6074.34\text{Å}, V_0 = (-0.54 \pm 0.03)\text{B}, \\ &\lambda = 5944.83\text{Å}, V_0 = (-0.54 \pm 0.03)\text{B}, \\ &\lambda = 5400.56\text{Å}, V_0 = (-0.79 \pm 0.04)\text{B}, \end{split}$$

Построим график зависимости задерживающего напряжения от частоты излучения.

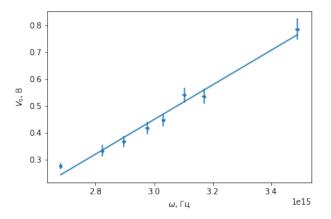


Рис. 5: График зависимости  $U_0(\omega)$ .

С помощью метода наименьших квадратов проведём аппроксимирующую прямую. По коэффициенту наклона прямой a определим постоянную Планка:  $\hbar = a \cdot e = (1.03 \pm 0.06) \cdot 10^{-34}$  Дж · с. Построим график зависимостей  $U_I(V)$ .

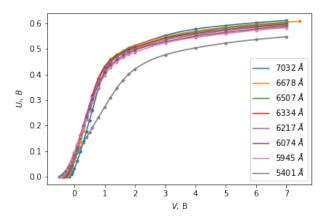


Рис. 6: График зависимости  $U_I(V)$ .

По графику видно, что с увеличением длины волны значение тока насыщения увеличивается, а величина задерживающего напряжения уменьшается.

#### Обсуждение результатов и выводы

В работе была экспериментально подтверждена линейная зависимость корня из фототока от величины задерживающего напряжения:

$$\sqrt{I} \propto V_{\text{задерж}}$$
.

Была подтверждена линейная зависимость задерживающего напряжения от частоты падающего на фотоэлемент излучения:

$$V_{
m задерж} \propto \omega.$$

Была определена постоянная Планка:

$$\hbar = (1.03 \pm 0.06) \cdot 10^{-34} \, \text{Дж} \cdot \text{c}, \ \ \hbar_{\text{reop}} = 1.054... \cdot 10^{-34}.$$

В пределах погрешности теоретическое и измеренное значения совпадают.